

# HU-FRIEDY STUFENBIEGEZANGE

| Z-FÖRMIGE KRÜMMUNGEN MIT EINEM EINZIGEN HANDGRIFF

Mit den Hu-Friedy Stufenbiegezangen kann der Kieferorthopäde Z-förmige Krümmungen (bajonettförmige Krümmungen) in einem einzigen, einfachen Schritt erzeugen, indem er den Zangengriff sanft zusammendrückt.

Diese Stufenbiegezangen sind aus Immunity Steel® gefertigt, dem qualitativ hochwertigsten chirurgischen Stahl mit einer optimalen Mischung aus Carbon und Chrom, der bei richtiger Verwendung und Pflege korrosionsfest ist.


Hu-Friedy Stufenbiegezangen erzeugen ein rechtes oder linkes Step-up oder Step-down bei 1/2, 3/4 oder 1 mm

1/2 mm | **678-340**

3/4 mm | **678-341**

1 mm | **678-342**

DAS BEIDSEITIG VERSETZTE MAUL ERMÖGLICHT DRAHTKRÜMMUNGEN VON BIS ZU 0,53 MM X 0,64 MM (0,022" X 0,025")

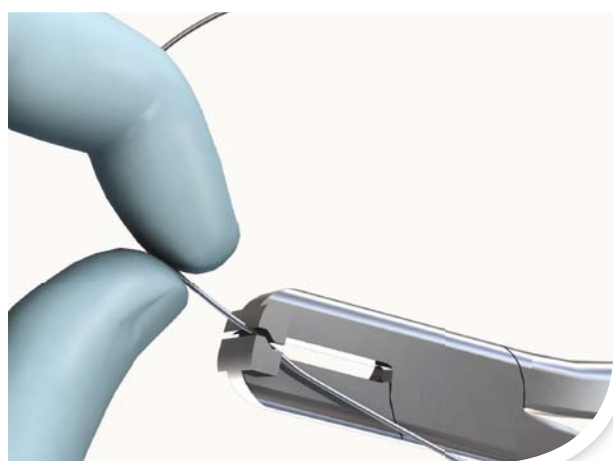

*Dank der Stufenbiegezangen kann der Kieferorthopäde Z-förmige Krümmungen (bajonettförmige Krümmungen) in einem einzigen, einfachen Schritt erzeugen, indem er den Zangengriff sanft zusammendrückt.*



*Z-Krümmungen werden am häufigsten in Fällen verwendet, in denen ein bestimmter Zahn oder bestimmte Zähne extrudiert oder intrudiert werden soll/sollen. Die Krümmungen können auch ihre Neigung und/oder Drehung verändern, wodurch die kieferorthopädische Behandlung des Patienten verbessert wird.*

Besuchen Sie uns auf [Hu-Friedy.eu](http://Hu-Friedy.eu)

Hersteller: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC | 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA  
Customer Care Department: Kostenlose Telefonnummer: 00800 48 37 43 39  
Kostenlose Faxnummer: 00800 48 37 43 40 | E-Mail: [info@hu-friedy.eu](mailto:info@hu-friedy.eu) | Website: [Hu-Friedy.eu](http://Hu-Friedy.eu)  
©2015 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. HFO-415-D/0715

How the best perform

**Hu-Friedy**